

# BESTELFORMULIER BENEN JOBST® CONFIDENCE

Datum		Patiënt	
Firma		Geslacht	/
Telefoonnummer			
Naam besteller		Schemanummer	

Stuur dit formulier naar:  
orders.be@essity.com

Aantal	CCL1	CCL2	CCL3
Links			
Rechts			

JOBST Confidence is enkel beschikbaar in één CCL per kledingstuk

Uitvoeringen	
ABI sok*	
AD	
AG	
AT	
AG-HT (mono-AT)*	
Bermuda*	
CT (capri)*▼	
BIT (legging)*▼	
BT (legging)*▼	

Opties broekdeel	
Voor heren met gulp	
Voor heren zonder gulp	
Met normale tailleband	<input checked="" type="checkbox"/>
Tailleband met bloemmotief*	

### Broekdeel: nieuwe maten!



### Opmerkingen

- \* Binnenkort beschikbaar.
- ▼ Standaard overlapping > 3 cm.
- Slechts mogelijk bij een schuine voet.
- AD en AG hebben standaard een Slipvorm (schuine rand).


Opties been	
Rechte rand (AD, AG)●	
Kniecomfortzone (niet voor ABI, AD en Bermuda)	

Opties boord	
SoftFit (AD)	
Noppen bovenop 5 cm (AG)	

Opties voet		
	Open teen	Gesloten Teen
Rechte voet		
Schuine voet		
<b>Hallux valgus zone</b> ■		
Links		
Rechts		
<b>Enkelcomfortzone</b>		

Kleur	
Beige	Jeans Heather
Caramel	Red Heather
Black	Anthracite Heather

Designelementen	
Deco Line (midden scheenbeen)	
Initialen (max. 2 letters)	

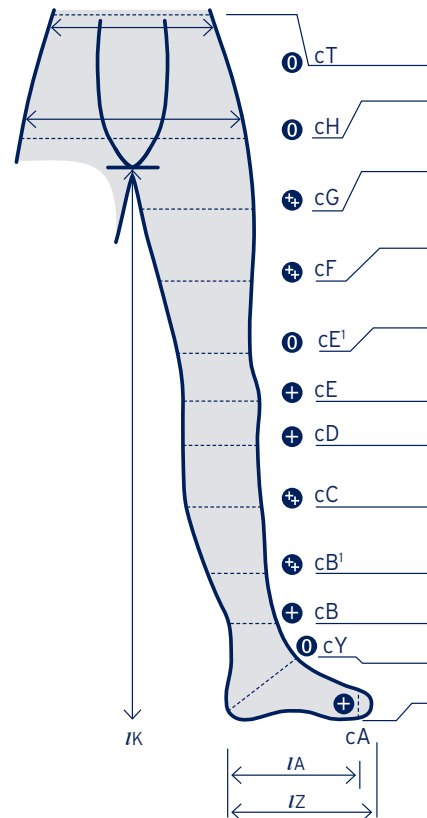

Omvangsmaten (c)		
	links	rechts
cT		
cH		
cG		
cF		
cE'		
Enkel voor Bermuda		
cE		
cD		
cC		
cB'		
cB		
cY		
cA		

Lengtematen (l)			
IK³ voorkant broek			
ITT volledige broek			
IT	I/H	I/K	

Maat IK is noodzakelijk voor AG

	links	rechts
/Slipvorm		

Standaard: 10% cG indien niet ingevuld

/G bilplooi		
-------------	--	--

/F		
----	--	--

/E'		
-----	--	--

Enkel voor Bermuda, 4 cm boven de knieschijf

/E		
/D		

/C		
----	--	--

/B'		
-----	--	--

/B		
----	--	--

Voetlengte	
/A (invullen bij rechte voet)	
Mediaal /A (invullen bij schuine voet)	
Lateraal /A (invullen bij schuine voet)	
Totale lengte /Z (invullen bij gesloten teen)	

Essity Belgium SA-NV  
Health and Medical Solutions  
Berkenlaan 8b, bus 3 - 1831 Diegem  
Tel +32(0)2 766 05 05  
Fax +32(0)800 15 934  
info.be@essity.com · www.jobst.be

# JOBST® Confidence

Deze 3 meethulpmiddelen ondersteunen u tijdens het meten van de nieuwe JOBST Confidence panty-modellen.



## Meetkaart

### Lengtemaat IK



1. Plaats de meetkaart in **liggende** positie voorzichtig aan de binnenkant van één been, zo hoog mogelijk in de lies.
2. Zorg ervoor dat de bovenrand van de meetkaart parallel loopt met de grond, het JOBST logo helpt u hierbij.
3. Meet nu lengte K loodrecht van de vloer tot aan de bovenkant van de kaart.

## Meten met spanning

Om een optimale pasvorm te bereiken, dienen de omtrekmaten onder verschillende spanning te worden opgenomen.

- ① Huidmaat zonder spanning.
- + Aantrekken tot de eerste weerstand.
- + Aantrekken tot de tweede weerstand.



## Elastische riem

### Omvangmaat cH en lengtemaat IH



1. Plaats een elastische riem rond de grootse omtrek van de billen.
2. Meet de omtrek cH aan de bovenrand van de riem. De spanning voor deze maat is nul.
3. Laat de riem op deze plaats zitten terwijl u de lengte IH meet.
4. Lengte IH wordt gemeten aan de buitenkant van het been, vanaf de voeten tot de bovenkant van de riem.
5. Laat het meetlint loodrecht starten op de vloer en meet bovenaan langs de contour van de heup.

### Omvangmaat cT en lengtemaat IT

1. Verplaats de elastische riem naar de taille of daar waar de tailleband voor de patiënt comfortabel zit.
2. Meet de omtrek cT aan de bovenrand van de riem. De spanning voor deze maat is nul.
3. Laat de riem op deze plaats zitten terwijl u de lengte IT meet.
4. Lengte IT wordt gemeten aan de buitenkant van het been, vanaf de vloer tot de bovenkant van de riem.
5. Laat het meetlint loodrecht starten op de vloer en meet bovenaan langs de contour van de heup tot aan meetpunt T.



## Clip voor op het meetlint

### Lengtematen ITT en IK<sup>3</sup>



De nieuwe maten IK<sup>3</sup> en ITT zijn noodzakelijk om de lengte van het kruisgedeelte en de gewenste taillebandhoogte te bepalen.

1. Start met het meten van de ITT.
2. Gebruik de hoogte van de elastische riem tijdens het meten van het T-meetpunt als leidraad.
3. Plaats het meetlint met de clip erop vooraan op het lichaam aan de bovenzijde van de elastische riem en in het midden van de taille.
4. Rol het lint zacht onder het kruis door tot aan het midden van de taille achteraan op het lichaam. Dit is lengte ITT.
5. Voor de lengte IK<sup>3</sup> houdt u het meetlint in dezelfde positie.
6. De patiënt kan zelfstandig de clip verschuiven naar het midden van het kruis. Lengte IK<sup>3</sup> is de afstand van de bovenkant van de riem vooraan tot het punt van de clip.
7. Laat nu het meetlint los en lees de lengte IK<sup>3</sup> af op de positie waar de clip zich op het meetlint bevindt.