

JOBST®

Compressiekousen
die het leven
verlichten

JOBST® compressiekousen voor apotheek

UltraSheer - Opaque - Maternity

Casual Pattern - Sport - ForMen Ambition



Inhoud

Voorwoord	4
JOBST® UltraSheer	6
JOBST® Opaque	8
JOBST® Maternity	10
JOBST® Casual Pattern	16
JOBST® Sport	18
JOBST® ForMen Ambition	20
Indicaties	23

Voorwoord

JOBST® therapeutische compressiekousen

In deze brochure vindt u het assortiment van rondbreikousen voor apotheken. Het assortiment is afgestemd op de behoefte van de patiënt die u bezoekt voor compressietherapie.

Comfort

De JOBST therapeutische compressiekousen zijn zodanig ontworpen dat ze aan het einde van de dag nog net zo comfortabel aanvoelen als bij het aantrekken. JOBST gebruikt duurzame en zachte vezels, die tevens luchtig zijn en het transpiratievocht afvoeren.

Gezondheid

JOBST therapeutische compressiekousen bevorderen de bloeddorstrooming en zijn bijgevolg speciaal ontworpen om verlichting te bieden bij vermoeide, pijnlijke benen. Dankzij de gradueel degressieve druk op de benen zijn ze uitermate geschikt als ondersteuning bij het behandelen van veneuze aandoeningen. JOBST kousen waarborgen een efficiënte behandeling, zonder te moeten inboeten op comfort en stijl.

Elegantie

De JOBST therapeutische compressiekousen verstevigen en vormen de benen. JOBST biedt een ruime keuze in stijlvolle compressiekousen voor iedere gelegenheid.

Uitstekend draagcomfort met **SoftFit technologie**

Beschikbaar in **JOBST® UltraSheer** en **JOBST® Opaque**

De effectiviteit van compressietherapie wordt niet enkel bepaald door de graduele compressie die kousen bieden, maar ook door de therapietrouw van de patiënt. Het draagcomfort voor patiënten is dus van essentieel belang voor het slagen van compressietherapie. Aan de boord kunnen veel kousen echter knellen, daarom ontwikkelde JOBST de SoftFit-technologie. Deze innovatieve technologie verhoogt het draagcomfort doordat het meegebreide garen dat de kousen op hun plek houdt zacht aansluit op de huid.

SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren, voorkomt afzakken.

**100% GRADUELE
COMPRESSIE**

SoftFit technologie vermindert de druk van de boord van de kous, en garandeert graduele compressie in de hele kous.



KLINISCH GETEST

**VERBETERD
DRAAGCOMFORT**

SoftFit technologie stelt patiënten in staat het toegenomen comfort te ervaren.

JOBST® UltraSheer ♀

De modieuze compressiekous

JOBST UltraSheer biedt uw patiënten graduele compressie in combinatie met een stijlvol design en een hoog comfort. Dankzij omwonden garen en de versterkte hielzone is JOBST UltraSheer geschikt voor langdurig gebruik. Het resultaat is een verhoogde therapietrouw en een beter resultaat voor uw patiënten en hun benen.



Ultra transparant met een hoge elasticiteit voor mooie, elegante benen



Het luchtdoorlatende, zachte garen zorgt in combinatie met het superieure vochtbeheer van JOBST Advanced Comfort voor een optimaal comfort



Een glanzende look laat de keuze voor iedere gelegenheid, speciaal voor business- en avondkleding

Compressieklasse

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

Kleuren

Natural


Caramel

Black

Boordafwerking



SoftFit beschikbaar in kniekous

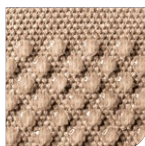

Kant met siliconen noppen (dot)



JOBST® UltraSheer

JOBST UltraSheer biedt patiënten **graduele compressie**, samen met het comfort en de stijl in therapeutische kousen. Het resultaat is een verhoogde mate van therapietrouw en een beter resultaat voor patiënten en hun benen.

JOBST® Advanced Comfort

JOBST UltraSheer maakt gebruik van JOBST Advanced Comfort. Dankzij het superieure vochtbeheer voor de huid wordt een hoog comfort garandeerd.




SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren en afzakken


Deze revolutie in compressiekousen vermindert de druk van de boord van de kous en garandeert graduele compressie in de volledige kous.



Modellen

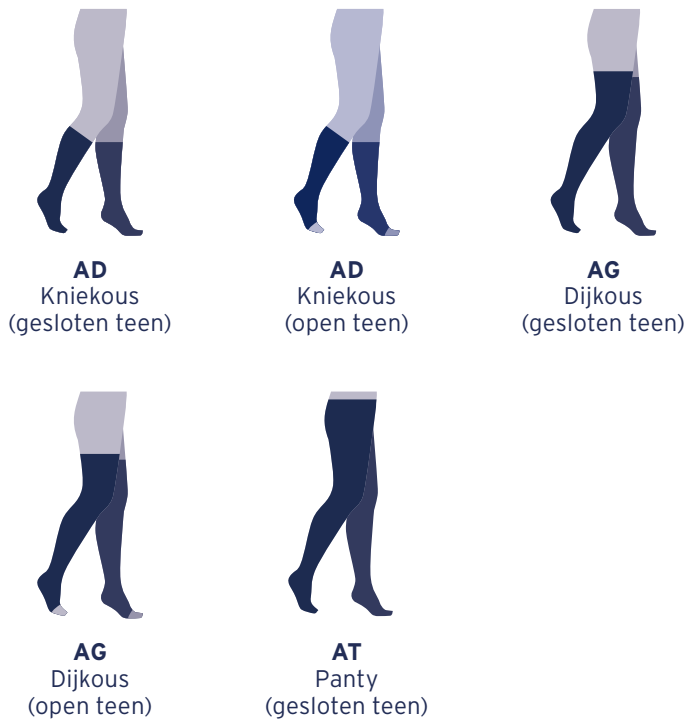

Maattabel

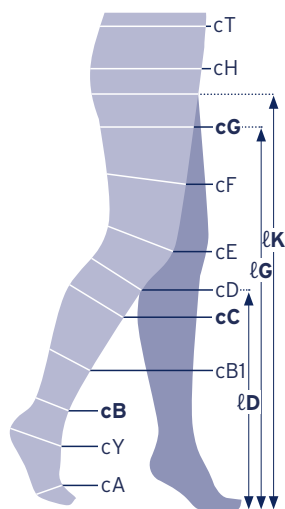

Meet-punt	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT*	≤ 80 cm		≤ 90 cm		≤ 90 cm		≤ 110 cm		≤ 110 cm		≤ 120 cm	
cH*	≤ 95 cm		≤ 105 cm		≤ 105 cm		≤ 125 cm		≤ 125 cm		≤ 135 cm	
cG	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D (kniekous) **Lengte G (dijkous)** **Lengte K (panty)**
 ℓD petite: 34 - 38 cm ℓG petite: 60 - 69 cm ℓK petite: 65 - 75 cm
 ℓD regular: 38 - 45 cm ℓG regular: 69 - 80 cm ℓK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm

* Wanneer cH en/of cT hoger dan bovengenoemde omtrek: kies voor een panty met een Maxi-broek

JOBST® Opaque

De comfortabele compressiekous voor elke dag

JOBST Opaque is een zeer comfortabele naadloze rondbreikous met een graduele compressie. Het speciale Nilit Aquarius garen en de innovatieve breitechniek maken de kousen zeer gemakkelijk aan te trekken en zachter dan ooit. Daarnaast is dit een sterke en duurzame kous voor elke dag.



Verhult kleine imperfecties zoals spataders of verkleuringen



Effectieve vochtdoorlaatbaarheid dankzij JOBST Advanced Comfort helpt de voeten droog te houden



Zacht garen met een sterke werking die helpt om zwelling in de benen tegen te houden

Compressieklasse

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

Kleuren

Natural


Caramel

Black

Boordafwerking



SoftFit beschikbaar voor kniekous (AD)

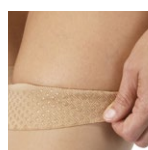

Noppen (dot)



JOBST® Opaque

Biedt patiënten **graduele compressie**, samen met het comfort en de stijl in therapeutische kousen. Het resultaat is een verhoogde mate van therapietrouw en een beter resultaat voor patiënten en hun benen.

JOBST® Advanced Comfort

JOBST Opaque maakt gebruik van JOBST Advanced Comfort. Dankzij het superieure vochtbeheer voor de huid wordt een hoog comfort garandeerd.



SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren en afzakken

Deze revolutie in compressiekousen vermindert de druk van de boord van de kous en garandeert graduele compressie in de volledige kous.



Modellen



AD
Kniekous
(gesloten teen)



AD
Kniekous
(open teen)



AG
Dijkous
(gesloten teen)




AG
Dijkous
(open teen)



AT
Panty
(gesloten teen)



Maattabel

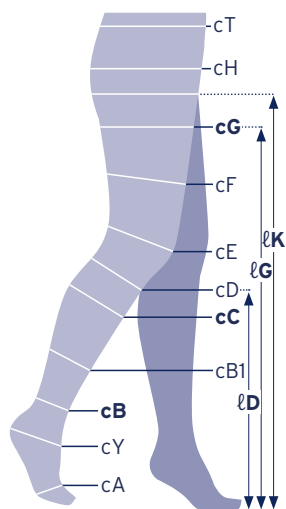

Meet-punt	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT*	≤ 80 cm		≤ 90 cm		≤ 90 cm		≤ 110 cm		≤ 110 cm		≤ 120 cm	
cH*	≤ 95 cm		≤ 105 cm		≤ 105 cm		≤ 125 cm		≤ 125 cm		≤ 135 cm	
cG	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34	30 - 37	30 - 37	33 - 40	33 - 40	35 - 43	35 - 43	37 - 46	37 - 46	39 - 49	39 - 49	39 - 49
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20	20 - 22	20 - 22	22 - 24	22 - 24	24 - 26	24 - 26	26 - 28	26 - 28	28 - 30	28 - 30	28 - 30
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D (kniekous) **Lengte G (dijkous)** **Lengte K (panty)**
 ℓD petite: 34 - 38 cm ℓG petite: 60 - 69 cm ℓK petite: 65 - 75 cm
 ℓD regular: 38 - 45 cm ℓG regular: 69 - 80 cm ℓK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm

* Wanneer cH en/of cT hoger dan bovengenoemde omtrek: kies voor een panty met een Maxi-broek

JOBST® Maternity Opaque ♀

Een lichter gevoel tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap maakt het lichaam hormonale veranderingen door die een aantal gevolgen hebben. De bloeddruk en het bloedvolume nemen toe om een groeiende baby te voeden, maar dit kan ook leiden tot symptomen zoals pijnlijke benen, gezwollen enkels, en het vergroot het risico op spataders.

Dit is allemaal heel normaal tijdens de zwangerschap, maar het kan ook pijnlijk zijn en de dagelijkse routine beïnvloeden (wanneer schoenen bijvoorbeeld niet meer goed passen). Op dat moment verdienen benen extra aandacht en zorg. JOBST Maternity compressiekousen zorgen ervoor dat je je meteen lichter voelt tijdens deze periode.



Het mengsel van zacht garen is gemaakt om comfortabel aan te voelen op elke huid.



Speciale garens voeren het vocht af en helpen om voeten droog te houden.



De uitstekende ventilatie en vochtregulatie helpen de voeten droog te houden



De SoftFlex buikinzet zorgt voor compressie die zich aanpast aan de groeiende buik, zonder te moeten inboeten aan comfort. Deze speciale stretchzone omhelst de gevoelige huid rond de taille.

Compressieklasse

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

Kleuren

Caramel

Black

Navy

Siliconenboord



Zig-zag gebreide boord AT



Ontworpen voor een betere luchtcirculatie

Met deze unieke ventilatiezone willen we een extra comfortabel en fris gevoel bieden. De bewezen kwaliteit van JOBST Opaque wordt uitgebreid met de ingewerkte ventilatiezone voor een optimale luchtcirculatie.

We hebben de ventilatiezone slim geplaatst in de holte tussen de tenen en de bal van de voet om een nog betere luchtstroming te garanderen.

Modellen




AT-MAT
Panty
(gesloten teen)



Maattabel

Maat	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
cB1	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30

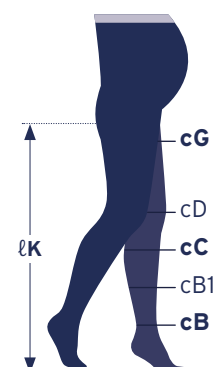

Lengte K

ℓK petite: 65 - 75 cm


ℓK regular: 75 - 85 cm



Om uw zwangere klanten correcte informatie te bezorgen over compressietherapie tijdens de zwangerschap, ontwikkelden we een brochure speciaal op hun maat. Naast de basisprincipes van compressietherapie, geven we hen ook heel wat tips om de belasting op buik en rug te verlichten. Een gezond lichaam betekent namelijk een gezonde zwangerschap.

Waarom zwangerschapscompressie gebruiken?

- ✓ Minder zwellling in voeten en benen
- ✓ Minder last van pijnlijke benen
- ✓ Minder zware en vermoeide benen
- ✓ Minder duizeligheid en misselijkheid

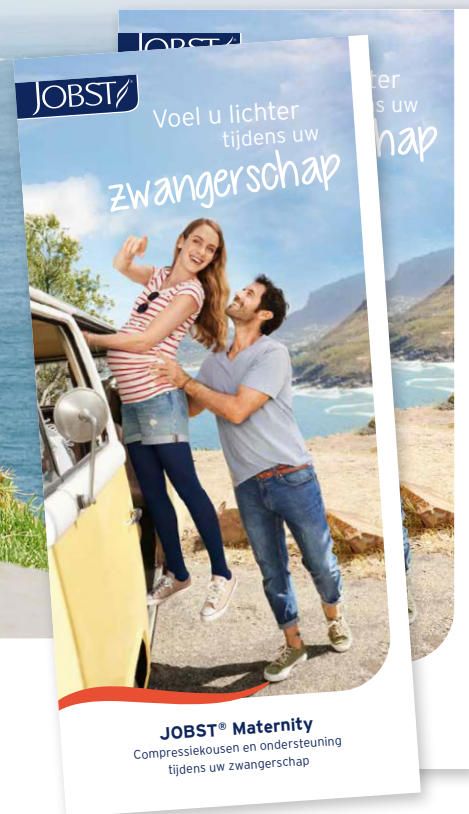

**Vraag naar de patiëntenbrochure
bij uw Essity vertegenwoordiger!**

JOBST® Maternity ♀

Ondersteunende zwangerschapsproducten

Een totaalconcept aan producten die zich
aanpassen aan alle stadia van de zwangerschap.

JOBST® Maternity Support Belt

Ondersteunt de buik en rug in
de gevorderde stadia van de
zwangerschap, en blijft nog
steeds bijna onzichtbaar onder
gewone kledij.

Dankzij de modulaire
klittenbandsluiting kan
de gordel **continu worden
aangepast** aan de groeiende
buik tijdens de laatste
maanden van de zwangerschap



Verstelbaar

Ontworpen om **discreet te
blijven onder kleding** en
kan worden gecombineerd
met zowat elke outfit



Een ontwerp dat
discreet blijft

Het nieuwe riemdesign is
speciaal ontworpen voor
zwangere vrouwen om
**voor een geoptimaliseerde
pasvorm te zorgen**



Anatomische
pasvorm

JOBST® Maternity Belly Band

Vanaf de eerste tekenen van de zwangerschap tot het midden van het derde trimester ondersteunt de JOBST Maternity buikband de taille en de onderrug.



JOBST® Maternity Postnatal Tube


Al vanaf de eerste weken na de bevalling zorgt de JOBST Maternity Postnatal Tube voor een discreet vormgevend effect. Ondersteunt de buik en de onderrug.



Kleuren



Rose

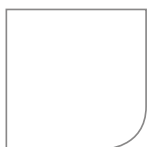

White*



Black*

* Alleen beschikbaar voor de Belly Band en de Postnatal Tube

Support Belt (Heup)

Maat	Rose
S	4310-280
M	4310-298
L	4310-306
XL	4310-314

Belly Band (Heup)


Maat	Rose	White	Black
S	4310-322	4310-405	4310-363
M	4310-330	4310-413	4310-371
L	4310-348	4310-421	4310-389
XL	4310-355	4310-439	4310-397

Postnatal Tube (Taille)

Maat	Rose	White	Black
S	4310-447	4310-520	4310-488
M	4310-454	4310-538	4310-496
L	4310-462	4310-546	4310-504
XL	4310-470	4310-553	4310-512

Maattabel

	S	M	L	XL
Support Belt (Heup)	80 - 90 cm	90 - 100 cm	100 - 110 cm	110 - 130 cm
Belly Band (Heup)	80 - 110 cm	100 - 120 cm	110 - 130 cm	120 - 140 cm
Postnatal Tube (Taille)	56 - 76 cm	76 - 88 cm	88 - 99 cm	99 - 110 cm

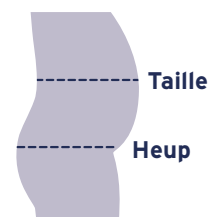

JOBST® Casual Pattern ♂

De casual compressiekous met een modieus patroon

JOBST Casual Pattern garandeert comfort zonder de dagelijkse stijl van uw patiënten te beïnvloeden. Deze compressiekousen hebben een aantrekkelijk ruitpatroon, gecreëerd dankzij een unieke breitechniek. De zachte, ademende stof is verkrijgbaar in drie modieuze kleuren en biedt uw patiënten een leuk alternatief voor klassieke compressiekousen.



Comfortabel gedurende de hele dag dankzij een hoog katoengehalte



Een mengsel van zachte garens en een aangename boord zorgen voor een superieur draagcomfort



Luchtdoorlatend om de therapietrouw te verbeteren

Compressieklasse

CCL 1: 15 - 20 mmHg

CCL 2: 20 - 30 mmHg

Assortiment

Model	Drukklasse	Teenstuk
AD	1 - 2	Gesloten

Kleuren



Pink



Blue




Grey




Hoogwaardige natuurlijke vezels en een unieke breitechniek (patent aangevraagd) zorgen ervoor dat JOBST® Casual Pattern kousen net zo goed aanvoelen als ze eruit zien

Dankzij een mix van zachte, natuurlijke vezels voelen ze aan als een normale kous, ondanks het feit dat ze graduele medische compressie bieden.

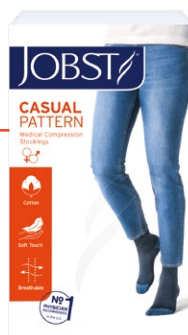

De hoogwaardige vezelmix met organisch katoen maakt JOBST Casual Pattern een uiterst zachte en duurzame kous. Onze unieke breitechniek die bij het breien van het ruitmotief geen losse draden nalaat aan de binnenzijde van de kous, helpt om drukplekken te beperken.



Kniekous AD (gesloten teen)

Compressie	Maat	Pink 	Blue 	Grey 
Klasse 1: 15-20 mmHg	S	4201-216	4201-091	4201-158
	M	4201-224	4201-09	4201-166
	L	4201-232	4201-117	4201-174
	XL	4201-240	4201-125	4201-182
	L-FC	4201-257	4201-133	4201-190
	XL-FC	4201-265	4201-141	4201-208
Klasse 2: 20-30 mmHg	S	4201-398	4201-273	4201-331
	M	4201-406	4201-281	4201-349
	L	4201-414	4201-299	4201-356
	XL	4201-422	4201-307	4201-364
	L-FC	4201-430	4201-315	4201-372
	XL-FC	4201-448	4201-323	4201-380

Maattabel

Maat	Enkel	Kuit
	 cB - de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	 cC - de grootste kuitomtrek
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm
Speciale maten		
L-FC	25 - 30 cm	46 - 61 cm
XL-FC	30 - 36 cm	46 - 61 cm



JOBST® Sport ♀♂

De atletische compressiekous

JOBST Sport biedt effectieve compressietherapie in de vorm van een atletische kous. Deze unisex compressiekous heeft de uitstraling van een sportkous. Dankzij het speciale garen is dit een uiterst zachte kous die gemakkelijk aan te trekken is.



Anatomisch gevormde hiel- en zoolkussentjes voor een uitstekend comfort tijdens het sporten



Effectieve geurbestrijding dankzij vezels met actieve kool



Speciale microvezeltechnologie drijft het vocht af voor koele en droge voeten

Compressieklasse

CCL 1: 15 - 20 mmHg

CCL 2: 20 - 30 mmHg

Assortiment

Model	Drukklasse	Teenstuk
AD	1 - 2	Gesloten

Kleuren



Pink/grey



Royal blue/
grey



Black/
cool black






Kniekous AD (gesloten teen)

Compressie	Maat	Pink/grey	Royal blue/grey	Black/cool black
Klasse 1: 15-20 mmHg	S	3787-389	4151-403	4151-445
	M	3787-397	4151-411	4151-452
	L	3787-405	4151-429	4151-460
	XL	3787-413	4151-437	4151-478
Klasse 2: 20-30 mmHg	S	3787-421	4151-486	4151-528
	M	3787-439	4151-494	4151-536
	L	3787-447	4151-502	4151-544
	XL	3787-454	4151-510	4151-551

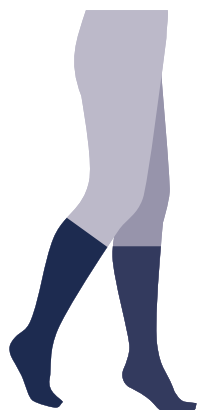

Maattabel



Maat	Enkel	Kuit
	 cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	 cC de grootste kuitomtrek
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm

JOBST® ForMen Ambition ♂

Stijlvolle compressiekousen voor heren


JOBST ForMen Ambition biedt de perfecte combinatie tussen stijl en therapeutische efficiëntie zonder in te boeten op comfort. Deze compressiekous met luxueus comfort is ideaal voor mannen die lange tijd rechtstaan of zitten.



De luchtdoorlatende stof helpt de voeten droog te houden dankzij een versnelde verdamping



Dankzij een speciale technologie met actieve kool wordt het vocht snel van de huid afgevoerd en blijven de voeten de hele dag door fris en koel

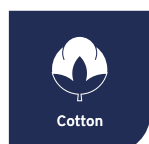

Het hoge katoengehalte zorgt ervoor dat de kous natuurlijk aanvoelt en draagcomfort biedt

Kleuren




Compressieklasse

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg


Assortiment

Maat	Teenstuk
1, 2, 3, 4, 5, 6	Gesloten
Drukklasse	Model
1 en 2	AD

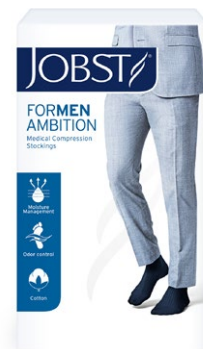

Maattabel

Maat/Meetpunt	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

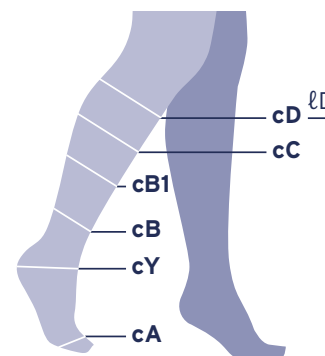

ℓD regular: 39 - 45 cm
ℓD long: 45 - 51 cm

Maten zijn in cm



Compressiekousen gemakkelijk aan- en uittrekken

Scan de QR-codes om de video's te bekijken.



AD
Kniekous
open teen



Aantrekken



AD
Kniekous
gesloten teen



Aantrekken



AG
Dijkous
gesloten teen



Aantrekken



AT
Panty
gesloten teen



Aantrekken



Uittrekken



Uittrekken



Uittrekken

Cutimed® Acute

Super hydraterend schuim op basis van ureum 5% of 10%



UREUM

Soepele, zachte en intens gehydrateerde huid

Bindt vocht in de huid en verbetert het vermogen van de huid om vocht vast te houden

Cutimed® Acute: de expert bij een droge huid

De 2 varianten in ureum concentraties zijn geschikt en aanbevolen tijdens compressietherapie.

5% 125 ml CNK. 2620-540

Te gebruiken bij droge en geschubte huidzones – geschikt voor diabetici

10% 125 ml CNK. 2620-557

Te gebruiken bij extreem droge, ruwe en geschubte huid - geschikt voor diabetici

De voordelen

- Snelle opname door de huid
- Hoge vochtinbrengende capaciteit zonder een vetting residu achter te laten
- Verstopt de poriën niet
- Met een kleine hoeveelheid kan men een groot oppervlak behandelen
- Speciale samenstelling*
- Zeer efficiënte hydratatie
- Wordt zeer goed verdragen door textiel (vb: compressiekousen)
- Gemakkelijk aan te brengen

* verwijst naar Cutimed® Acute 5% en 10% ureum

Cutimed®

Indicaties

Compressieklasse 1

- ✓ Vermoeide, pijnlijke benen
- ✓ Licht gezwollen enkels, benen en voeten
- ✓ Lichte vorm van spataderen zonder oedeemvorming
- ✓ Lichte vorm van spataderen tijdens de zwangerschap
- ✓ Preventie van het posttrombotisch syndroom

Compressieklasse 2

- ✓ Vermoeide, pijnlijke benen
- ✓ Middelmatige tot ernstige spataderen
- ✓ Middelmatige tot ernstige spataderen tijdens de zwangerschap
- ✓ De eerste tekenen van het posttrombotisch syndroom
- ✓ Na stripping van spataderen
- ✓ Na sclerotherapie
- ✓ Posttraumatisch en postoperatief oedeem
- ✓ Aanleg tot oedeem
- ✓ Oppervlakkige tromboflebitis
- ✓ Voorkomen van terugkerende ulcera

Compressieklasse 3

- ✓ Actieve veneuze ulcera
- ✓ Preventie van terugkerende veneuze ulcera
- ✓ Ernstige oedeemvorming

Contra-indicaties

- ✓ Ischemie (bijv. vergevorderde arteriële aandoeningen)
- ✓ Niet behandelende congestieve hartinsufficiëntie
- ✓ Onbehandelde septische phlebitis; phlegmasia coerulea dolens

In de volgende gevallen kan het dragen van therapeutische elastische kousen tot problemen leiden:

- ✓ Immobiliteit (bedlegerig); huidinfecties; exsuderende wonden; overgevoeligheid voor het materiaal en bij verminderde gevoeligheid van de extremiteiten (bijv. bij diabetes mellitus). Slecht passende therapeutische compressiekousen kunnen leiden tot huidnecrose, drukgerelateerde beschadiging van perifere zenuwen en diepveneuze trombose.

Wilt u meer informatie?

Op www.JOBST.be kunt u een overzicht van het JOBST assortiment vinden of neem contact op met uw vertegenwoordiger.




Zoek de juiste CNK-code met onze handige productzoeker!



Ontdek het nu via
www.jobstpharma.be

JOBST_CNK_NL
Essity Belgium SA-NV
Jobst CNK brochure Apotheek_NL

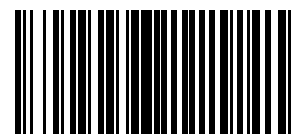

JOBST®,
an Essity brand 07/2022

Essity Belgium SA-NV
Health and Medical Solutions
Berkenlaan 8b bus 3
1831 Diegem

Tel +32(0)2 766 05 05
Fax +32(0)800 15 934
info.be@essity.com
www.JOBST.be